

55
LAT

Thomashilfen

PIONIER
OD 1969

NOWOŚĆ!

Przetestowany zgodnie
z nową normą
bezpieczeństwa R129
(fotele i akcesoria) -
łącznie z ochroną
przed uderzeniami
bocznymi!



100 - 150 cm
15 - 50 kg

Indywidualne dopasowanie: Idealna regulacja
dzięki elastycznym skrzydłom bocznym
i zagłówkowi

Axkid NEXTKID Reha


Thomashilfen



Axkid NEXTKID Reha

- Skrzydła boczne można regulować niezależnie, np. w celu zapewnienia optymalnej pozycji siedzącej w przypadku skoliozy lub skurczów.
- Naprawdę lekki - waży zaledwie 8 kg - może być używany przy wzroście do 150 cm i wadze do 50 kg.
- Szeroka gama akcesoriów, takich jak obrotowa podstawa, ułatwia codzienne użytkowanie, zwłaszcza podczas przenoszenia cięższych i większych dzieci.
- Oparcie i 8-pozycyjny regulowany zagłówek zapewniają optymalną regulację, niezależnie od wieku i wielkości dziecka.



Thomashilfen dostarcza specjalne foteliki samochodowe dla dzieci od ponad 35 lat. Obecnie wykorzystujemy również naszą wiedzę, aby opracowywać własne foteliki rehabilitacyjne. Zawierają one całe nasze wieloletnie doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb dzieci i rodziców.

Gunnar Thomas, właściciel




Thomashilfen

Pionier

FOTELIKI SAMOCHODOWE





od
1988 roku

Thomashilfen dysponuje największą na świecie ofertą rehabilitacyjnych fotelików samochodowych i zapewnia odpowiednie wsparcie osobom w każdym wieku i z każdym stopniem niepełnosprawności.

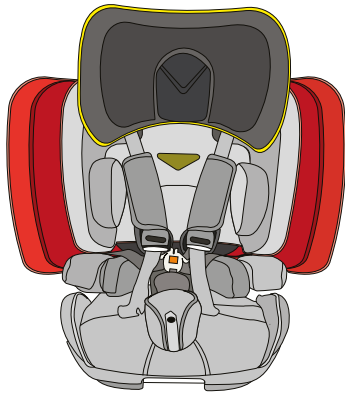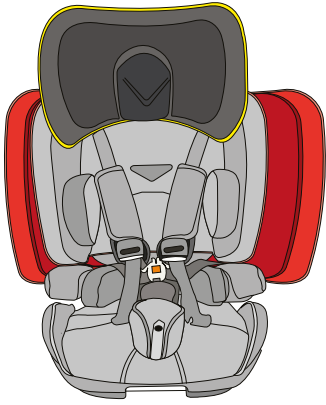

Indywidualnie wysuwane skrzydła boczne i oddzielnie regulowany zagłówek doskonale dostosowują się do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego dziecka.

◀ **Przykład zastosowania**

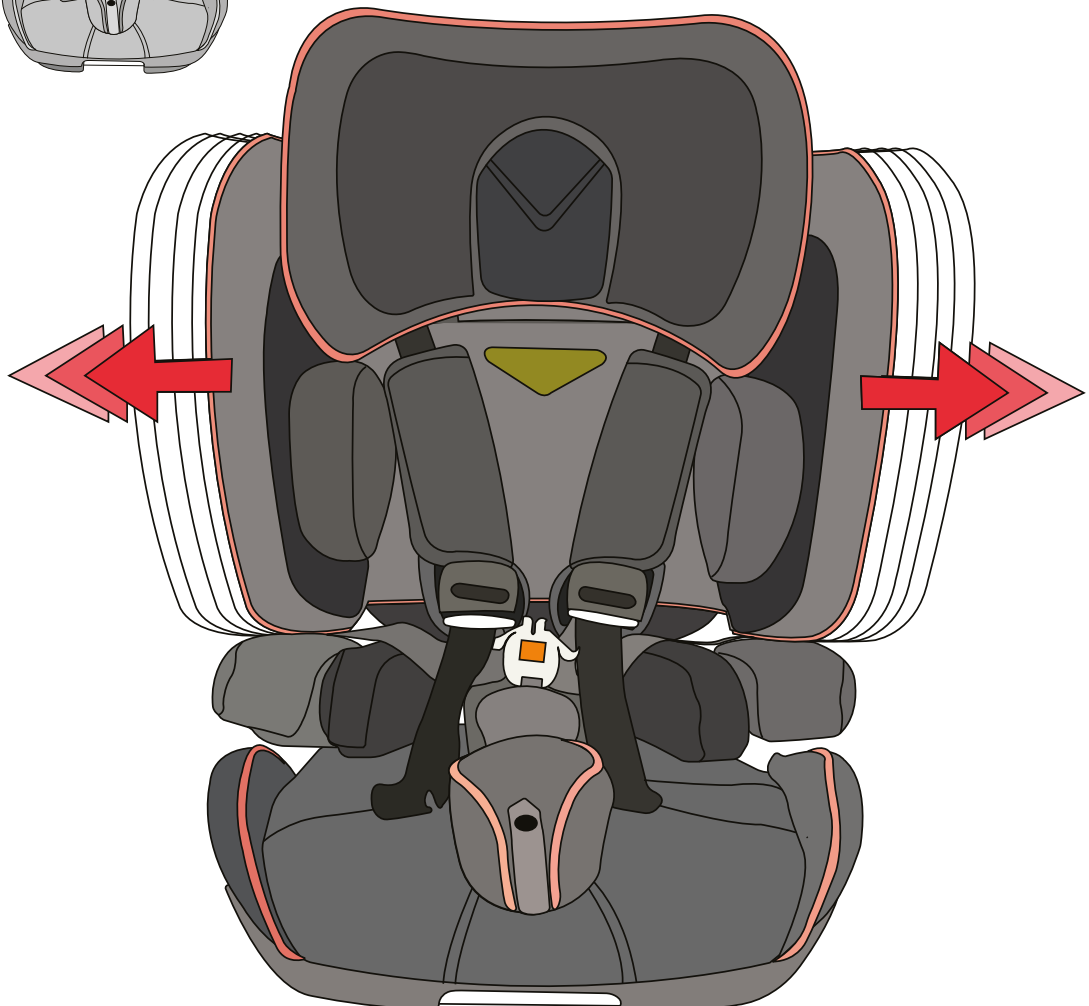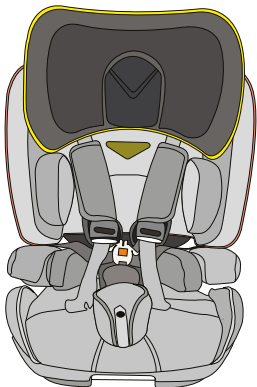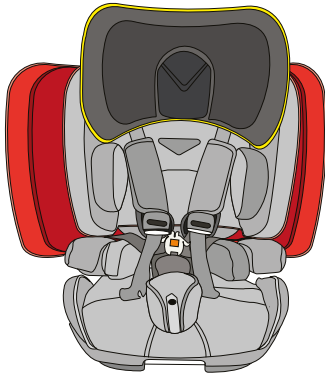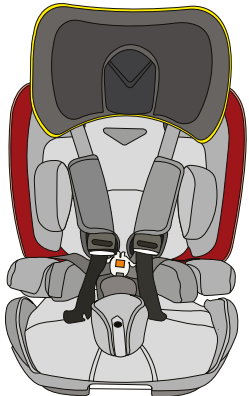

PODSTAWOWY SPRZĘT REHABILITACYJNY W ZESTAWIE



Podstawowa konfiguracja rehabilitacyjna może być opcjonalnie wyposażona w odpowiednią podstawę obrotową i uchylną.



Podstawa obrotowa i podstawa uchylna mogą być uzupełnione o szeroką gamę akcesoriów, w zależności od potrzeb. Aby ułatwić obsługę, dźwignia zwalniająca znajduje się z boku podstawy obrotowej.

PROWADNICA UPRZĘŻY

optymalizuje prowadzenie szelek i zapewnia optymalne ułożenie pasa bezpieczeństwa na miednicy oraz zapobiega ześlizgiwaniu się pasa z ramienia lub zakłócaniu szyi.

NAKŁADKA PCHWINOWA

zasłania klamrę i zmniejsza nacisk jej pasa na wrażliwą okolicę brzucha.



TAPICERKA

Zintegrowany system wentylacji redukuje gromadzenie się ciepła i pocenie się.



GMFCS
Poziom
III-V

100 - 150 cm
Wysokość
dziecka
15 - 50 kg
Waga dziecka



ZAGŁÓWEK

8-pozycyjna regulacja wysokości - łatwa i szybka regulacja, rośnie krok po kroku wraz z dzieckiem. Zagłówek można regulować oddzielnie od skrzydeł bocznych.

zintegrowana ochrona przed uderzeniami bocznymi



PRECYZYJNA REGULACJA

dla lepszej postawy górnej części ciała: duża welurowa tapicerka umożliwia precyzyjne zamocowanie bocznego podparcia tułowia.



Boczne skrzydła można regulować niezależnie w czterech stopniach. Odpowiedni dla różnych niepełnosprawności i elastyczny dla każdego rozmiaru i kształtu ciała.



ISOFIX

Szybki i łatwy montaż w zaledwie kilka sekund. Wskaźnik bezpieczeństwa w kolorze zielonym/czerwonym dla prawidłowego mocowania. Pasek ISOFIX automatycznie się rozkłada, dzięki czemu montaż jest jeszcze łatwiejszy.

Axkid NEXTKID Reha

► Funkcje (do wyboru)




BOCZNE WSPARCIE TUŁOWIA poprawia wsparcie górnej części ciała i zapewnia optymalne wsparcie dzięki precyzyjnemu przyleganiu do welurowej wyściółki.



SKRZYDŁA BOCZNE są indywidualnie regulowane, dostosowują się do wzrostu i zapewniają optymalną pozycję siedzącą.




ZAGŁÓWEK z miękką powierzchnią na rzep umożliwia przymocowanie dodatkowych akcesoriów do podparcia głowy.

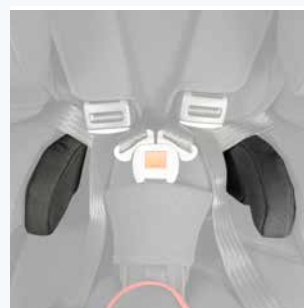


TAPICERKA BOCZNA SIEDZISKA zapewnia dobre podparcie, szczególnie dla szczupłych dzieci.



■ Innowacyjna, zaawansowana technologicznie podstawa rozszerza fotelik samochodowy o różne funkcje, takie jak podstawa obrotowa, podstawa uchylna lub kombinacja obu. Ta elastyczność umożliwia łatwą regulację i znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo dziecka.

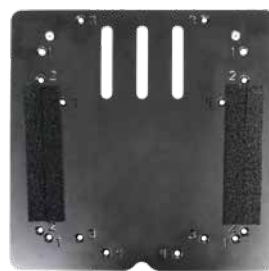

PLYTA ADAPTERA -
jest **ZAWSZE**
wymagana dla
następujących
akcesoriów

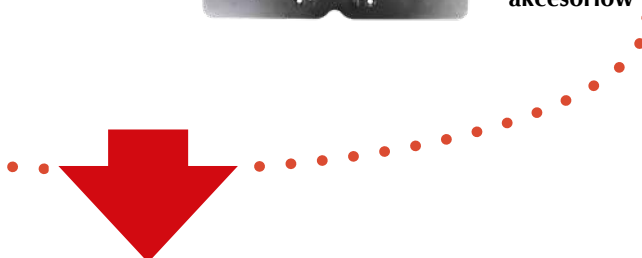


PODSTAWA OBROTOWA
ułatwia przenoszenie, łatwo
dostępna dźwignia zwalnająca
może być zamówiona do
obrotu w prawo lub w lewo.




PODSTAWA ODCHYLANA
Umożliwia odchylanie siedziska
w 4 stopniach (2,5°/5°/7,5°/10°)
w celu uzyskania wygodnej
pozycji spoczynkowej.



**POCHYLANA PODSTAWA
I OBROTOWA PODSTAWA**
połączone dla uzyskania
najlepszej możliwej obsługi
i komfortu

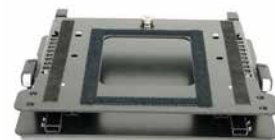

**MONTAŻ WSPORNIKA
PODNÓŻKA**
z SEATFIXEM lub bez

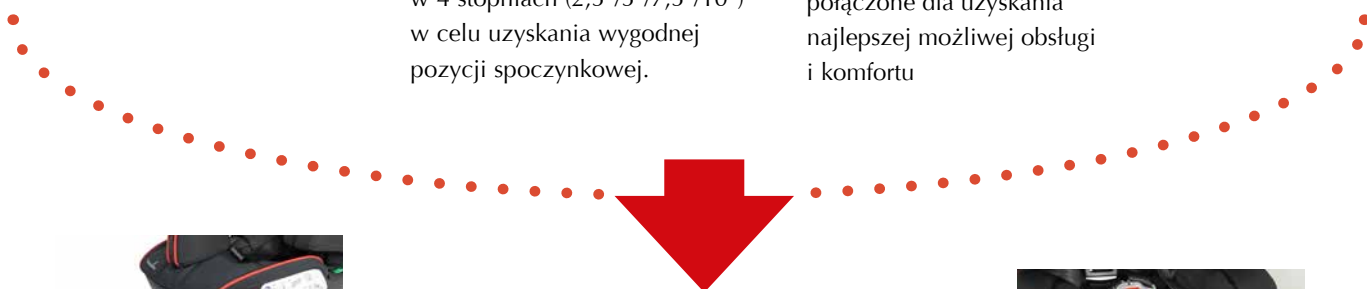

PODNÓŻEK
zapewnia stabilną
pozycję siedzącą,
pozwalając dziecku
mocno oprzeć stopy.



**PODPÓRKA, ADAPTER
FOTELIKA LUB PAS
STABILIZUJĄCY**
zapewniają stabilne podparcie
fotelika w samochodzie.



KLIN ODWODZĄCY
(regulowany) poprawia kontrolę
nad nogami i zapobiega ich
krzyżowaniu.

► Akcesoria (do wyboru)



STOLIK, WSPARCIE ZEWNĘTRZNE wspomaga utrzymanie prawidłowej i stabilnej postawy dziecka, zapewniając wszechstronne wsparcie i bezpieczeństwo.



Klin siedziska (poniżej) umożliwia pochylenie siedziska o +10°.



PRZEDŁUŻENIE SIEDZISKA oferuje lepsze wsparcie dla nóg i indywidualne dopasowanie dla wysokich dzieci.

Pełny przegląd akcesoriów można znaleźć w formularzu na stronie internetowej: www.thomashilfen.com

Wymiary i waga

Axkid NEXTKID Reha

Głębokość siedziska (za pasem krokowym)	23 cm
Głębokość siedziska	38 cm
Szerokość siedziska	22 cm - 29 cm
Wysokość oparcia (siedzisko wewnątrz)	75 cm
Wysokość ramion (prowadnica uprząży)	33 - 51 cm
Szerokość ramion	36 - 42 cm
Pochylenie fotela (model podstawowy)	2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Wymiary całkowite (szer. x wys. x gł.):	44 x 62 x 48 cm
Waga siedziska	8,5 kg
Wysokość użytkownika	100 - 150 cm
Maksymalna waga użytkownika	50 kg

Funkcje standardowe:

Siedzisko i oparcie ze zintegrowanym 8-pozycyjnym zagłówkiem z regulacją wysokości; zintegrowany 5-punktowy pas bezpieczeństwa z centralnym regulatorem; regulowane na wysokość nakładki na ramiona z systemem nakładek na pasy Axkid wraz z małą nakładką na krocze; zdejmowane nakładki boczne na bagażnik i siedzisko; 4-stopniowo regulowane skrzydła boczne, wraz ze zintegrowanymi złączami ISOFIX, zdejmowane osłony.

Obejrzyj wideo:

Jak szybko i łatwo Axkid NEXTKID Reha jest instalowany w samochodzie.



WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA W POLSCE:
Timago International Group
Ossowski spółka Komandytowa

Foteliki samochodowe Rehab od Thomashilfen: odpowiednie rozwiązanie na każdą podróż!



Reboarder Axkid ONE 2 Reha

61 - 125 cm



AVOVA Sperling Reha

76 - 135 cm



Axkid NEXTKID Reha

100 - 150 cm



Hercules Small

100 - 150 cm



Hercules Prime

130 - 180 cm

Pełną ofertę fotelików rehabilitacyjnych znajdziesz na stronie www.thomashilfen.com.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Niemcy
Telefon: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com